

Português

Instrução de Uso: IFU-00106 - 0000

MS/ANVISA nº: 10396830066

Nome Técnico ANVISA: Dispositivo oral para redução da capacidade de mordida

Nome Comercial da Família ANVISA: ORTHO PROTECTOR

Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.

**Fabricado por:**

Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiáí, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

ORTHO PROTECTOR



O Ortho Protector é uma placa de levante de mordida que age como um relaxante muscular. Ideal para pacientes que apresentam estresse oclusal, tal como bruxismo e disfunções temporomandibular. Pode ser utilizado em conjunto com o tratamento ortodôntico.


Modelo de tamanho único e ajustável aos diferentes tamanhos de arcada. Possui 4 níveis de ajuste para maior conforto durante o uso. Acompanha uma caixa de bolso para transporte e armazenamento.

Indicação de uso:

Descrição das situações clínicas de aplicação mais comuns:

- Relaxante muscular para pacientes com musculaturas tensas ou fadigas;
- Disfunção Temporomandibular Sintomática como alívio imediato das dores orofaciais;
- Bruxismo;
- Facetas Laminadas (lente de contato);
- Ortodontia como liberador oclusal em caso de mordidas cruzadas
- Reabilitação protética e implantes para proteção noturna.


Recomendações de uso para o paciente

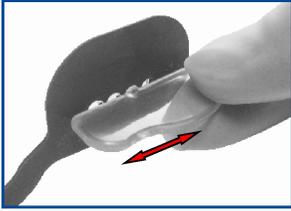

- Ajuste a posição das placas oclusais, deixando a região maior sobre os últimos molares.



- Há quatro posições disponíveis, para melhor ajuste e conforto.
- Molhar o conjunto facilita a movimentação e o ajuste de posição.

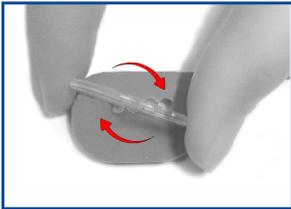

- Ajuste também a rotação das placas oclusais, para que a alça frontal se acomode na cervical dos incisivos inferiores, porém evitando que toque no freio labial.

- Caso haja bráquetes, procure evitar a interferência da alça com os mesmos.



- O aparelho funciona com a boca fechada e é mantido em posição pela pressão dos lábios, bochechas e mordida.

- Evitar morder as placas oclusais com força, procurando somente "descansar" os dentes sobre elas.

- Após o uso, higienizar com escova dental e pasta, enxaguar, secar e guardar na caixa de bolso.

Contraindicações:

A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento.
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico.
- Pacientes com transtornos mentais que requerem cuidados especiais ou crianças com idade inferior a 5 anos.

Efeitos colaterais:

É da inteira responsabilidade do profissional qualificado identificar qualquer possibilidade de risco de dano e/ou contraindicação que possam surgir durante o uso, comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral não desejado.

Validade:

36 meses.

Advertências:

Utilize conforme orientação de seu dentista, o Ortho Protector pode ser um grande aliado para tratamento temporário e alívio dos sintomas relacionados ao estresse oclusal, tais como dores de cabeça e dores musculares na região temporomandibular.



Uso em único paciente, múltiplas vezes.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gingivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é constituído de materiais sujeitos a reciclagem, seu descarte deve ser feito de forma correta e seletiva.

ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Códigos:¹ Organismo Certificador

Código	Produto	Quantidade	CE	Org ¹
65.03.001	Ortho Protector Azul	01	-	-
65.03.002	Ortho Protector Rosa	01	-	-

Revisão	Alterações
0	Elaboração e disponibilização no Portal Morelli.