

SELECIONE O IDIOMA



SELECT THE LANGUAGE



SELECCIONAR IDIOMA



Fabricado por / Manufactured by/ Fabricado por

Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil/Brazil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico / Technical Responsible: Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu / European Representative / Representante Europeo

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O – C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

Importante/ Important / Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto. / To consult the Instruction for Use, check the version indicated on the product label along with the code, and access the digital file at www.morelli.com.br/IFU. To get the printed Instruction for Use, without cost, please let us know through our Customer Service at +55(15)3328-8200 or send us an email at sac@morelli.com.br. For chemical compositions request Security Datasheet of the product. / Para ver la Instrucción de Uso, compruebe la versión indicada en la etiqueta del producto junto con el código, acceda al archivo digital en www.morelli.com.br/IFU. Para el uso de instrucciones impreso sin costo de emisión y envío, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente a través del teléfono +55(15)3328-8200 o por correo electrónico sac@morelli.com.br. Para composiciones químicas solicite la Hoja de Seguridad del producto.

Instrução de Uso / Instruction for Use / Instrucción de uso: 01.09.549 – Rev.02

Data de Emissão / Emission date / Fecha de Emisión: 01/2021

MS/ANVISA nº: 10396830015

Nome Técnico ANVISA: Elásticos Ortodônticos

Nome Comercial da Família ANVISA: ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS

Simbologia disponível na embalagem/ Symbology available on packaging/ Simbología disponible en la embalaje



Fabricante
Manufacturer
Fabricante



Representante na
Comunidade Européia
Representative in the
European Community
Representante en la
Comunidad Europea



Endereço
Address
Dirección



Telefone de contato
Contact phone
Teléfono de contacto.




Consulte as instruções de
uso digital
Refer to instructions for use
digital
Consulte las instrucciones
de uso digital



Consulte as instruções de
uso
Refer to instructions for use
Consulte las instrucciones
de uso



Cuidado! Ler as
instruções de uso
Caution! Read the
instructions for use
¡Precaución! Lea las
instrucciones de uso

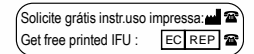

Solicite grátis instr. uso impressa:
Get free printed IFU :
Solicite gratuitamente a
instrução de uso impressa
Request free printed IFU
Solicite gratuitamente la
instrucción de uso impresa



Prazo de validade
Expiration date
Plazo de validez



Código do produto
Product reference
Código del producto



Número de lote
Lot number
Número de lote



Não reutilizar
Do not reuse
No lo reutilice



Não utilizar se a
embalagem estiver
danificada ou aberta
Do not use if package is
damaged or opened
No lo utilice si la embalaje
está danada o abierta



Produto esterilizado por
Óxido de Etileno
Ethylene Oxide Sterilized
Product
Producto esterilizado con
Óxido de Etileno




Não reesterilizar
No vuelva a esteriliza
Do not reesterilize



Produto esterilizável em
autoclave à temperatura
indicada
Product autoclavable at
indicated temperature
Producto autoclavable a la
temperatura indicada



Fabricado em Látex
Manufactured in latex
Fabricado en latex

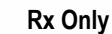

Uso sob prescrição do
profissional e venda
controlada
Prescription Only
Uso sob prescripción del
profesional y venta
controlada.



Marcação CE para
dispositivos classe I
CE Mark for class I devices
Marcado CE para
dispositivos de classe I



Marcação CE para
dispositivos classe IIa e IIb
CE Mark for class IIa and IIb
devices
Marcado CE para dispositivos
de classe IIa y IIb

Simbologia empregada varia de acordo com as características técnicas de cada produto. / Symbology employed varies according to the technical characteristics of each product. / Simbología utilizada varía en función de las características técnicas de cada producto.

Elástico Corrente




Os elásticos em Corrente são elastômeros ortodônticos, empregados como promotores de forças extras que possibilitam a redução dos espaços interdentais com maior rapidez. Possuem três formas de apresentação, curto, médio ou longo para melhor adequação à intenção de aplicação.

Elástico Corrente CURTO

Elástico Corrente MÉDIO

Elástico Corrente LONGO

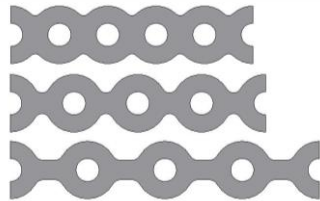

Indicação de uso:

- Retrações dentárias anteriores;
- Trações dentárias;
- Giros dentários;
- Fechamentos de espaços interdentais generalizados (Diastemas);
- Fechamentos de espaços relacionados a dentes extraídos/perdidos.

Contraindicações:

A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal;
- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento;
- Pacientes com ambiente bucal propício a desmineralização do esmalte dentário;
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico;
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico;
- Reabsorção acentuada de raiz;
- Reabsorção óssea existente;
- Descalcificação existente no esmalte dentário;
- Uso em ambiente de Ressonância Magnética.

Efeitos colaterais:

É da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de dano e/ou contraindicação que possam surgir durante o tratamento, comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral não desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais não desejados podem incluir: danos na mucosa oral e a língua, dificuldade ao falar ou mastigar, descoloração de dentes, descalcificação, reabsorção radicular, complicações periodontais, reações alérgicas, dificuldades na manutenção da higiene oral, dor, desconforto e sensibilidade.

Validade:

3 anos

Advertências:

Conservar em lugar fresco e arejado. Evitar a exposição à temperatura elevada ou à luz intensa, de modo a evitar a diminuição da vida útil do produto e perda das propriedades mecânicas.

Mantenha o produto na embalagem original e sempre fechado, de modo a evitar ressecamento.

Ligaduras elastoméricas estão sujeitas a alteração de cor no ambiente bucal: Considere substituí-las em períodos menores para manter o efeito estético desejado.

Este produto não deve ser utilizado em ambiente de Ressonância Magnética, pois pode ocasionar interferências nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicação e providenciar a remoção do aparelho caso necessário.



Produto não reutilizável, pois o seu reuso pode causar infecção cruzada e perda de propriedades mecânicas devido ao desgaste natural.

O produto é fornecido na condição não esterilizado, contudo, possui biocompatibilidade comprovada não sendo necessárias medidas de limpeza, desinfecção ou esterilização, desde que a embalagem não tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em contato com superfícies ou substâncias diferentes do propósito de uso, recomenda-se descartar o mesmo. O produto não deve ser reutilizado ou reprocessado.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recessão gengival ou deiscência de raiz.

Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Especificações conforme DIN EN ISO 21606

Diâmetro Interno (Di); Diâmetro Externo (Do); Comprimento do elo (K); Espessura de corte na secção transversal (t); Força inicial (F₀); Força residual após 24 horas (F₂₄).

Corrente Curto

(Di - Ø 1,4^{±0,2}mm); (Do - Ø 3,0^{±0,2}mm); (K - 2,5^{±0,2}mm); (t - 0,7^{±0,1}mm); (F₀ - 310gf ^{±50gf}/3N ^{±0,5N}); (F₂₄ - >55%)


Corrente Médio

(Di - Ø 1,4^{±0,2}mm); (Do - Ø 3,0^{±0,2}mm); (K - 3,3^{±0,2}mm); (t - 0,7^{±0,1}mm); (F₀ - 310gf ^{±50gf}/3N ^{±0,5N}); (F₂₄ - >55%)

Corrente Longo

(Di - Ø 1,4^{±0,2}mm); (Do - Ø 3,0^{±0,2}mm); (K - 4,0^{±0,2}mm); (t - 0,7^{±0,1}mm); (F₀ - 245gf ^{±50gf}/2,4N ^{±0,5N}); (F₂₄ - >55%)

Elastic in Chain

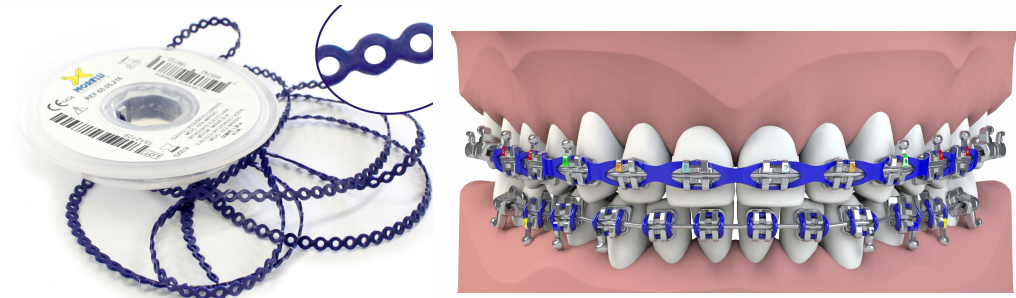


The Elastic in Chain are orthodontic elastomers, used as promoters of extra forces that allow the reduction of the interdental spaces more quickly.

They have three forms of presentation, short, medium or long for better adaptation to the intention of application.

Elastic in Chain - SHORT

Elastic in Chain - MEDIUM

Elastic in Chain - LONG

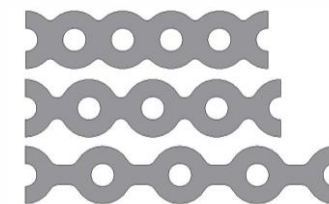

Use Indication:

- Anterior Dental Retractions;
- Dental Turning;
- Giros dentários;
- Closures of generalized interdental spaces (Diastemas);
- Closures of spaces related to extracted / lost teeth.

Contraindications:

Morelli Ortodontia supplies the products only to qualified professionals. It is the responsibility of the orthodontist to identify conditions that may be contraindicated for treatment, such as:

- Patients with poor oral hygiene;
- Patients unable to cooperate with treatment;
- Patients with propitious oral environment to dental enamel demineralization;
- Allergy to any of the materials of the orthodontic appliance;
- Diseases or other pre-existing conditions that may hinder orthodontic treatment;
- Root resorption;
- Existing bone resorption;
- Existing Decalcification in dental enamel;
- Use in a Magnetic Resonance environment.

Side effects:

It is the responsibility of the qualified professional to identify any possibility of risk of harm and / or contraindication that may arise during treatment, communicate to the patient the possibility of any unwanted side effect.

During treatment, unwanted side effects may include: damage to oral mucosa and tongue, difficulty in speaking or chewing, tooth discoloration, decalcification, root resorption, periodontal complications, allergic reactions, difficulties in maintaining oral hygiene, discomfort, pain, discomfort and sensibility.

Expiry date:

3 years

Warnings:

Store in a cool and airy place. Avoid exposure to high temperature or intense light, in order to avoid the decrease of the useful life of the product and loss of the mechanical properties.

Keep the product in its original packaging and always closed in order to avoid drying.

Elastomeric ligatures are inherent to color change in the oral environment: Consider replacing them for shorter periods to maintain the desired aesthetic effect.

This product must not be used in a Magnetic Resonance environment as it may cause interference with the images during the examination. It is up to the orthodontic practitioner to warn the patient about this contraindication and arrange for removal of the device if necessary.



Non reusable product, as its reuse may cause cross infection and loss of mechanical properties due to natural wear.

The product is supplied in unsterile condition, however has proven biocompatibility, not being necessary cleaning, disinfection or sterilization measures, since the package has not been violated. If the product comes into contact with surfaces or substances other than its intended purpose prior to use, it is recommended to discard the product. The product should not be reused or reprocessed.

Do not use the product if its packaging has been damaged or opened, in order to minimize possible dangers related to the transmission of microorganisms or possible falsification of products.

Product for exclusive application by a qualified professional, the use by person without the necessary technical knowledge may cause unwanted tooth movement, bone loss, loss of the dental element, fenestration, gingival recession or root dehiscence.

It is up to the qualified professional to guide the patient about correct oral hygiene, to avoid the appearance of plaque and tartar, or diseases such as gingival inflammation (gingivitis), periodontitis or even endocarditis.

Considering that the product is used in contact with mucous membranes and body fluids, it is recommended to the professional to apply the sanitary norms applicable for the disposal of medical products according to current sanitary regulations.

ATTENTION:

Morelli is not responsible for the results obtained by applying the product without due precautions or non-observance of the warnings.

Specifications according to DIN EN ISO 21606:

Internal Diameter (Di); External Diameter (Do); Cutting thickness in cross section (t); Initial force (F0); Residual force after 24 hours (F24)

Short Chain

(Di - $\varnothing 1,4^{+0,2}$ mm); (Do - $\varnothing 3,0^{+0,2}$ mm); (K - $2,5^{+0,2}$ mm); (t - $0,7^{+0,1}$ mm); (F₀ - 310gf $^{+50gf/3N \pm 0,5N}$); (F₂₄ - >55%)

Medium Chain

(Di - $\varnothing 1,4^{+0,2}$ mm); (Do - $\varnothing 3,0^{+0,2}$ mm); (K - $3,3^{+0,2}$ mm); (t - $0,7^{+0,1}$ mm); (F₀ - 310gf $^{+50gf/3N \pm 0,5N}$); (F₂₄ - >55%)

Long Chain

(Di - $\varnothing 1,4^{+0,2}$ mm); (Do - $\varnothing 3,0^{+0,2}$ mm); (K - $4,0^{+0,2}$ mm); (t - $0,7^{+0,1}$ mm); (F₀ - 245gf $^{+50gf/2,4N \pm 0,5N}$); (F₂₄ - >55%)

Elástico en Cadena



Los elásticos en Cadena son elastómeros ortodónticos, empleados como promotores de fuerzas extras que posibilitan la reducción de los espacios interdentes con mayor rapidez.

Se presentan tres formas de presentación, corto, medio o largo para mejor adecuación a la intención de aplicación.

Elástico en Cadena - CORTO



Elástico en Cadena - MEDIO



Elástico en Cadena - LARGO



Indicación de uso:

- Retracciones dentales anteriores;
- Tracción Dental;
- Giros dentales;
- Cierres de espacios interdentes generalizados (Diastemas);
- Cierres de espacios relacionados con dientes extraídos / perdidos.

Contraindicaciones:

La Morelli ofrece los productos sólo a personal cualificado. Es responsabilidad del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicados para el tratamiento tales como:

- Los pacientes con mala higiene bucal;

- Los pacientes incapaces de cooperar con el tratamiento;
- Pacientes con ambiente bucal propicio a desmineralización del esmalte dental;
- La alergia a cualquiera de los materiales del aparato;
- Las enfermedades o otras condiciones preexistentes que pueden dificultar el tratamiento de ortodoncia;
- Reabsorción radicular;
- Reabsorción ósea existente;
- Descalcificación existente en el esmalte dental;
- Uso en ambiente de Resonancia Magnética.

Efectos colaterales:

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y / o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados.

Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir: daños en la mucosa oral y lengua, dificultad para hablar a masticar, decoloración de los dientes, descalcificación, reabsorción de la raíz, complicaciones periodontales, reacciones alérgicas, dificultad en el mantenimiento de la higiene oral, incomodidad, dolor, incomodidad y sensibilidad.

Validez:

3 años

Advertencias:

Conservar en lugar fresco y ventilado. Evitar la exposición a la temperatura elevada o luz intensa, para evitar la disminución de la vida útil del producto y la pérdida de propiedades mecánicas.

Mantener el producto en su embalaje original y siempre cerrado para evitar que se seque.

Ligaduras elastoméricas son inherentes a los cambios de color en el ambiente oral: considere reemplazarlas por períodos más cortos para mantener el efecto estético deseado.

No utilice este producto en un ambiente de resonancia magnética, ya que puede ocasionar interferencias en las imágenes durante el examen. Cabe al profesional de ortodoncia advertir al paciente sobre esta contraindicación y providenciar la remoción del aparato caso necesario.



Producto no reutilizable. La esterilidad, la limpieza requerida y la resistencia mecánica del dispositivo no está garantizada en caso de reutilización.

El producto se suministra en condición no estéril, pero ha demostrado biocompatibilidad, no son necesarios pasos de limpieza, desinfección o esterilización, ya que el paquete no ha sido violado. Si el producto, antes del uso, entre en contacto con superficies u otras sustancias distintas de finalidad de uso, se recomienda desechar la misma. El producto no debe ser reutilizado o reprocesado.

No utilice el producto si la embalaje está danada o abierta, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles productos falsificados.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida de masa ósea, pérdida de dientes, fenestración, recesión gingival o dehiscencia de raíz.

Corresponde al profesional cualificado instruir al paciente sobre la higiene oral adecuada, para evitar la aparición de placa y tártaro o enfermedades como como la inflamación gingival (gingivitis), la periodontitis o la endocarditis.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

ATENCIÓN:

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Especificaciones según DIN EN ISO 21606:

Diámetro Interno (Di); Diámetro Externo (Do); Espesor de corte en la sección transversal (t); Fuerza inicial (F0); Fuerza residual después de 24 horas (F24)

Cadena Corto

(Di - $\varnothing 1,4^{\pm 0,2}$ mm); (Do - $\varnothing 3,0^{\pm 0,2}$ mm); (K - $2,5^{\pm 0,2}$ mm); (t - $0,7^{\pm 0,1}$ mm); (F₀ - 310gf ± 50 gf/3N $\pm 0,5$ N); (F₂₄ - >55%)

Cadena Medio


(Di - $\varnothing 1,4^{\pm 0,2}$ mm); (Do - $\varnothing 3,0^{\pm 0,2}$ mm); (K - $3,3^{\pm 0,2}$ mm); (t - $0,7^{\pm 0,1}$ mm); (F₀ - 310gf ± 50 gf/3N $\pm 0,5$ N); (F₂₄ - >55%)

Cadena Largo


(Di - $\varnothing 1,4^{\pm 0,2}$ mm); (Do - $\varnothing 3,0^{\pm 0,2}$ mm); (K - $4,0^{\pm 0,2}$ mm); (t - $0,7^{\pm 0,1}$ mm); (F₀ - 245gf ± 50 gf/2,4N $\pm 0,5$ N); (F₂₄ - >55%)

Códigos/Reference:


Código / Reference	Nome Comercial / Commercial Name / Nombre Comercial	Descrição / Description / Descripción
60.05.104	Elástico Corrente Curto Azul Bebê - 1,5m	Os elásticos Corrente com comprimento o CURTO Compriment o do elo de 2,5 mm Elastics in chain short
60.05.105	Elástico Corrente Curto Amarelo - 1,5m	
60.05.107	Elástico Corrente Curto Verde Musgo - 1,5m	
60.05.108	Elástico Corrente Curto Azul - 1,5m	
60.05.110	Elástico Corrente Curto Vermelho - 1,5m	
60.05.111	Elástico Corrente Curto Preto - 1,5m	
60.05.112	Elástico Corrente Curto Rosa - 1,5m	
60.05.113	Elástico Corrente Curto Roxo - 1,5m	
60.05.115	Elástico Corrente Curto Verde Mar - 1,5m	
60.05.116	Elástico Corrente Curto Azul Marinho - 1,5m	
60.05.117	Elástico Corrente Curto Prateado - 1,5m	
60.05.119	Elástico Corrente Curto Rosa Bebê - 1,5m	
60.05.120	Elástico Corrente Curto Marfim - 1,5m	
60.05.122	Elástico Corrente Curto Vinho - 1,5m	
60.05.124	Elástico Corrente Curto Verde Pérola - 1,5m	
60.05.126	Elástico Corrente Curto Rosa Pérola - 1,5m	
60.05.127	Elástico Corrente Curto Branco Renda - 1,5m	
60.05.128	Elástico Corrente Curto Lilás - 1,5m	
60.05.150	Elástico Corrente Curto Verde Limão Cristal - 1,5m	
60.05.151	Elástico Corrente Curto Vermelho Cristal - 1,5m	
60.05.152	Elástico Corrente Curto Laranja Cristal - 1,5m	
60.05.153	Elástico Corrente Curto Verde Cristal - 1,5m	
60.05.154	Elástico Corrente Curto Azul Cristal - 1,5m	
60.05.155	Elástico Corrente Curto Pink Cristal - 1,5m	
60.05.159	Elástico Corrente Curto Uva Cristal - 1,5m	
60.05.500	Elástico Corrente Curto Cristal - 4,5m	
60.05.501	Elástico Corrente Curto Cinza - 4,5m	

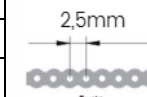

Código / Reference	Nome Comercial / Commercial Name / Nombre Comercial	Descrição / Description / Descripción
60.05.204	Elástico Corrente Médio Azul Bebê - 1,5m	Os elásticos Corrente com comprimento MÉDIO Comprimento do elo de 3,3 mm
60.05.205	Elástico Corrente Médio Amarelo - 1,5m	
60.05.207	Elástico Corrente Médio Verde Musgo - 1,5m	
60.05.208	Elástico Corrente Médio Azul - 1,5m	
60.05.210	Elástico Corrente Médio Vermelho - 1,5m	
60.05.211	Elástico Corrente Médio Preto - 1,5m	
60.05.212	Elástico Corrente Médio Rosa - 1,5m	
60.05.213	Elástico Corrente Médio Roxo - 1,5m	
60.05.215	Elástico Corrente Médio Verde Mar - 1,5m	
60.05.216	Elástico Corrente Médio Azul Marinho - 1,5m	
60.05.217	Elástico Corrente Médio Prateado - 1,5m	
60.05.219	Elástico Corrente Médio Rosa Bebê - 1,5m	
60.05.220	Elástico Corrente Médio Marfim - 1,5m	
60.05.222	Elástico Corrente Médio Vinho - 1,5m	
60.05.224	Elástico Corrente Médio Verde Pérola - 1,5m	
60.05.226	Elástico Corrente Médio Rosa Pérola - 1,5m	
60.05.227	Elástico Corrente Médio Branco Renda - 1,5m	
60.05.228	Elástico Corrente Médio Lilás - 1,5m	
60.05.250	Elástico Corrente Médio Verde Limão Cristal - 1,5m	
60.05.251	Elástico Corrente Médio Vermelho Cristal - 1,5m	
60.05.252	Elástico Corrente Médio Laranja Cristal - 1,5m	
60.05.253	Elástico Corrente Médio Verde Cristal - 1,5m	
60.05.254	Elástico Corrente Médio Azul Cristal - 1,5m	
60.05.255	Elástico Corrente Médio Pink Cristal - 1,5m	
60.05.259	Elástico Corrente Médio Uva Cristal - 1,5m	
60.05.510	Elástico Corrente Médio Cristal - 4,5m	
60.05.511	Elástico Corrente Médio Cinza - 4,5m	

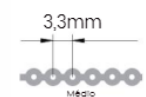

Código / Reference	Nome Comercial / Commercial Name / Nombre Comercial	Descrição / Description / Descripción
60.05.304	Elástico Corrente Longo Azul Bebê - 1,5m	Os elásticos Corrente com comprimento LONGO Comprimento do elo de 4,0 mm
60.05.305	Elástico Corrente Longo Amarelo - 1,5m	
60.05.307	Elástico Corrente Longo Verde Musgo - 1,5m	
60.05.308	Elástico Corrente Longo Azul - 1,5m	
60.05.310	Elástico Corrente Longo Vermelho - 1,5m	
60.05.311	Elástico Corrente Longo Preto - 1,5m	
60.05.312	Elástico Corrente Longo Rosa - 1,5m	
60.05.313	Elástico Corrente Longo Roxo - 1,5m	
60.05.315	Elástico Corrente Longo Verde Mar - 1,5m	
60.05.316	Elástico Corrente Longo Azul Marinho - 1,5m	
60.05.317	Elástico Corrente Longo Prateado - 1,5m	
60.05.319	Elástico Corrente Longo Rosa Bebê - 1,5m	
60.05.320	Elástico Corrente Longo Marfim - 1,5m	
60.05.322	Elástico Corrente Longo Vinho - 1,5m	
60.05.324	Elástico Corrente Longo Verde Pérola - 1,5m	
60.05.326	Elástico Corrente Longo Rosa Pérola - 1,5m	
60.05.327	Elástico Corrente Longo Branco Renda - 1,5m	
60.05.328	Elástico Corrente Longo Lilás - 1,5m	
60.05.350	Elástico Corrente Longo Verde Limão Cristal - 1,5m	
60.05.351	Elástico Corrente Longo Vermelho Cristal - 1,5m	
60.05.352	Elástico Corrente Longo Laranja Cristal - 1,5m	
60.05.353	Elástico Corrente Longo Verde Cristal - 1,5m	
60.05.354	Elástico Corrente Longo Azul Cristal - 1,5m	
60.05.355	Elástico Corrente Longo Pink Cristal - 1,5m	
60.05.359	Elástico Corrente Longo Uva Cristal - 1,5m	
60.05.520	Elástico Corrente Longo Cristal - 4,5m	
60.05.521	Elástico Corrente Longo Cinza - 4,5m	

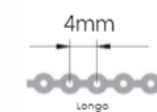

Controle de Revisões / Revision Control / Control de revisión		
Revisão nº Revision nº Revisión nº	Data / Date / Fecha	Alterações / Alterations / Actualizaciones
00	05/2018	Elaboração e disponibilização no portal Morelli. / Elaboration and availability on the Morelli website. / Elaboración y disponibilidad en la página web Morelli.
01	10/2019	Revisão das contraindicações, efeitos colaterais e advertências. / Review of contraindications, side effects and warnings. / Revisión de las contraindicaciones, efectos colaterales y advertencias.
02	01/2021	Revisão da máscara e composição / Review of template and composition / Revisión de la máscara y composición