

ISELECIONE O IDIOMA



SELECT THE LANGUAGE



SELECCIONAR IDIOMA



Fabricado por / Manufactured by/ Fabricado por

Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil/Brazil

Tel.: +55 15 – 3328 8200 / 0800 7031455

Responsável Técnico / Technical Responsible: Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu / European Representative / Representante Europeo

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O – C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

Importante/ Important/ Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o nº do registro, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. / To consult the Instruction for Use, check the version indicated on the product label along with the registration number, and access the digital file at www.morelli.com.br. To get the printed Instruction for Use, without cost, please let us know through our Customer Service at + 55 (15) 3328-8200 or send us an email at sac@morelli.com.br. / Para ver la Instrucción de Uso, compruebe la versión indicada en la etiqueta del product junto con el número del expediente, y acceda a el archive digital en www.morelli.com.br. Para el uso de instrucciones impreso sin costo de emisión y envío, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente a través del teléfono +55 15 3328-8200 o por correo electrónico sac@morelli.com.br.

Instrução de Uso / Instruction for Use / Instrucción de uso: 01.09.513 – Rev.00

Data de Emissão / Emission date / Fecha de Emisión: 08/2017

MS/ANVISA nº: 10396830039

Nome Técnico ANVISA: Fio para Ortodontia

Nome Comercial da Família ANVISA: Arcos, Fios e Molas CrNi

Simbologia disponível na embalagem/ Symbology available on packaging/ Simbología disponible en la embalaje

	Não reutilizar / Do not reuse / No lo reutilice		Consulte as instruções de uso / Refer to instructions for use / Consulte las instrucciones de uso
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta/ Do not use if package is damaged or open/ No lo utilice si la embalaje está danada o aberta		Prazo de validade / Expiration date / Plazo de validez
	Não reesterilizar / No vuelva a esterilizar/Do not reesterilize		Fabricante/ Manufacturer/ Fabricante
	Cuidado! Ler as instruções de uso / Caution! Read the instructions for use / ¡Precaución! Lea las instrucciones de uso		Representante na Comunidade Europeia / Representative in the European Community / Representante en la Comunidad Europea
	Produto esterilizado por radiação gama / Product sterilized through gamma rays / Producto esterilizado por radiación gama		Fabricado em Látex/ Manufactured in latex/ Fabricado en látex
	Código do produto / Product reference / Código del producto		Marcação CE para comercialização na Comunidade Europeia / CE Mark for European Community market / Marca CE para comercialización en la Comunidad Europea
	Produto esterilizável em autoclave à temperatura indicada / Product autoclavable at indicated temperature / Producto autoclavable a la temperatura indicada		Número de lote / Lot number / Número de lote

Simbologia empregada varia de acordo com as características técnicas de cada produto. /Symbology employed varies according to the technical characteristics of each product. / Simbología utilizada varia en función de las características técnicas de cada producto.

Arcos extraorais



Os Arcos Extraorais são componentes do aparelho ortodôntico, destinados a transmitir forças clínicas geradas fora da cavidade bucal nas regiões cervical, occipital e parietal as quais são aplicadas na movimentação e estabilização de elementos dentários ou no crescimento ósseo maxilofacial.

Indicação de uso:

Utilizado em conjunto com Tracionadores de Segurança, os quais determinam a força aplicada no Arco, são ligados pelo arco externo aos diversos tipos de apoio extraoral, já o arco interno é conectado em tubos ortodônticos ancorados nos dentes que sofrerão a movimentação ou estabilização. As situações clínicas são:

- Controle de ancoragem;
- Distalização de molares;
- Intrusão de molares;
- Inclinação de coroa de molares para distal;
- Contração ou expansão da arcada dentária superior;
- Controle do crescimento maxilar.

Instalação:

O encaixe intrabucal desses produtos são feitos através de um sistema que envolve o dente, a banda, o tubo e a extremidade do arco interno que é introduzida no tubo molar.

A ancoragem extrabucal é feita utilizando em conjunto com Tracionadores de Segurança, os quais determinam a força aplicada no Arco, são ligados pelo arco externo aos diversos tipos de apoio extraoral como Talas Cervicais ou Casquetes de Tração Regulável (Interlandi).

Instruções para o ortodontista:

- Conformar o Arco Extraoral para adaptá-lo a cada caso clínico, utilize alicates adequados e evite dobras em canto vivo pois podem induzir o arco a fraturas, assim como rebarbas as quais podem ferir o paciente.
- Não devem ser utilizados elásticos para ancoragem do Arco Extraoral, o uso de Tracionadores é imprescindível para a segurança do paciente.
- O modo correto de instalação do Arco Extraoral deve ser claramente demonstrado ao paciente e/ou responsáveis.
- Fraturas do arco, solturas involuntárias e encaixes incorretos podem ocasionar lesões;
- O Arco Extraoral deve ser verificado a cada consulta e problemas relatados durante o uso devem ser analisados pelo ortodontista.
- Deve ser informado ao paciente que o não cumprimento das Recomendações de Segurança pode resultar em lesão.
- Arredonde as extremidades de encaixe do arco interno para facilitar seu acoplamento nos tubos.
- Caso seja necessário promover a expansão da arcada, prefira introduzir a dobra de expansão após o paciente estar familiarizado com a instalação do Arco Extraoral.
- O Arco Extraoral só é indicado para a finalidade proposta, declarada (“Indicação de uso”) pela Morelli.
- Entregue ao paciente as Recomendações de Segurança que acompanham o Arco Extraoral dentro da bolsa plástica*.

Recomendações de Segurança para o Paciente:

- Atenção no momento da colocação ou remoção do Arco Extraoral, o manuseio ou encaixe inadequado pode causar lesões na mucosa, bochecha, face e olhos.
- Utilize um espelho para auxiliar a colocação do arco.
- Encaixe o arco nos tubos antes de acoplar os tracionadores.
- Desencaixe os tracionadores antes de remover o arco dos tubos.
- Não aplique força excessiva para encaixar o arco no tubo, caso o encaixe não ocorra com facilidade, procure seu ortodontista.
- Não utilize o Arco Extraoral durante a prática de esportes ou atividades que possam criar contato físico indevido.
- O arco interno do arco extraoral pode causar irritação ocasionando pequenas lesões temporárias na boca, essas situações são comuns e ocorrem somente na fase de adaptação inicial.
- Caso seja frequente o desencaixe do arco durante o período de sono, informe o ortodontista para que outra alternativa clínica seja considerada.

- Lave o Arco Extraoral frequentemente a fim de prevenir o acúmulo de resíduos do mesmo.
- Caso se observem trincas ou pontos de corrosão no Arco Extraoral, comunique ao ortodontista para que o mesmo avalie a necessidade de substituição do produto.

Diferenciam-se em suas dimensões de modelos, sendo que a escolha do tipo de Arco é realizada pelo profissional, de acordo com a necessidade do tratamento e a morfologia da arcada dentária do paciente.

Armazenagem:

Quando o arco não estiver em utilização deverá ser armazenado de forma adequada, na bolsa projetada especificamente para esta aplicação.



*Todos os arcos vem acompanhados de uma bolsa para arcos na cor fumê.

Contraindicações:

A Dental Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com higiene oral precária;
- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento;
- Alergia a qualquer um dos materiais do arco extraoral;
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico;
- Reabsorção óssea pré-existentes;

- Descalcificação existente no esmalte dentário;
- Pacientes com crescimento esquelético divergente (face longa).

Efeitos colaterais:

É da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de dano e/ou contraindicação que possam surgir durante o tratamento, comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral não desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais não desejados podem incluir: descoloração de dentes, descalcificação, reabsorção radicular, complicações periodontais, reações alérgicas, dificuldades na manutenção da higiene oral, desconforto e dor.

Composição/informação sobre os componentes:

Aço Inoxidável, Polímero termoplástico de Nylon reforçado com Fibra de Vidro.

Validade:

10 anos

Advertências:

O produto é indicado ao paciente por profissional qualificado, o qual deve orientar sobre o uso correto do produto prevendo instalação e remoção do Arco regularmente como em intervalos de cada refeição ou higienização bucal.

Este produto não teve sua biocompatibilidade e segurança avaliada no ambiente de ressonância magnética, o paciente deve ser orientado sobre essa condição.

Este produto contém Níquel. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a este metal. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico



Produto não reutilizável, pois o seu reuso pode causar infecção cruzada e perda de propriedades mecânicas devido ao desgaste natural.

O produto é fornecido na condição não esterilizado, contudo possui biocompatibilidade comprovada não sendo necessárias medidas de limpeza, desinfecção ou esterilização, desde que a embalagem não tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em contato com superfícies ou substâncias diferentes do propósito de uso, recomenda-se descartar o mesmo. O produto não deve ser reutilizado ou reprocessado.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado, o uso por pessoa sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário ou até mesmo danos irreversíveis.

Cabe ao profissional qualificado orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana ou ainda doenças como gengivite, periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com membranas de mucosas e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

ATENÇÃO:

A Morelli Ortodontia não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Facebows



Facebows are components of the orthodontic appliance, designed to transmit clinical forces generated outside the oral cavity in the cervical, occipital and parietal regions, which are applied in the movement and stabilization of dental elements or maxillofacial bone growth.

Use Indication:

Used with Safety Tractors, which determine the force applied to the arch, they are connected by the external arch to the several types of extraoral support, since the inner arch is connected in orthodontic tubes anchored in the teeth that will be moved or stabilized. The clinical situations are:

- Anchorage control;
- Molar distalization;
- Intrusion of molars;
- Inclination of crown from molars to distal;
- Contraction or expansion of the upper dental arch;
- Control of maxillary growth.

Installation:

The intra-buccal fitting of these products is made through a system that involves the tooth, the band, the tube and the end of the inner arch that is introduced into the molar tube.

The extraoral anchorage is made using in conjunction with Safety Tractors, which determine the force applied to the Arch, are connected by the external arch to the various types of extraoral support such as Cervical Neckpads or Headgear Adjustable Traction Interlandi.

Instructions for the orthodontist:

- To conform the facebow to adapt it to each clinical case, use suitable pliers and avoid bends in living corner as they can induce the arch to fractures, as well as burrs which can harm the patient.
- Elastic for anchorage of the Facebow must not to be used, the use of Tractors is essential for the patient's safety.
- The correct way of installation of the Facebow must be clearly demonstrated to the patient and/or responsible ones.
- Arch fractures, unintentional loosening and incorrect insertion may cause injury;
- The Facebow must be checked at each appointment and problems reported during use should be reviewed by the orthodontist.
- The patient must be informed that failure to comply with the Safety Recommendations can result in injury.
- Round the ends of the internal arch to facilitate its coupling in the tubes.
- If it is necessary to promote the expansion of the arch, prefer to introduce the expansion fold after the patient is familiar with the installation of the Facebow.
- The Facebow is only indicated for the stated purpose, stated ("Indication of use") by Morelli.
- Give the patient the Safety Recommendations that comes with Facebow in the plastic bag *.

Patient Safety Recommendations:

- Be careful when inserting or removing the Facebow, improper handling or fitting may cause injury to the mucosa, cheek, face and eyes.
- Use a mirror to assist in arch placement.
- Attach the arch to the tubes before engaging the tractors.
- Detach the tractors before removing the bow from the tubes.
- Do not apply excessive forcé to the arc in the tuve, if the assembling is not happening easily, search for the orthodontist.
- Do not use the Facebow during sports or activities that may create undue physical contact.
- The internal arch of the facebow may cause irritation causing minor temporary lesions in the mouth; these are common situations and occur only in the initial adaptation phase.
- If arch disarrangement is frequent during the sleep period, inform the orthodontist so that another clinical alternative is considered.

- Wash the Facebow often in order to prevent the same from residue buildup.
- If cracks or points of corrosion are observed in the Facebow, notify the orthodontist to evaluate the need for replacement of the product.

They differ in their model dimensions, and the type of expansion screw is chosen by the professional, according to the treatment need and the morphology of the patient's dental arch.

Storage:

When the arch is not in use, it should be stored properly in the bag designed specifically for this application.



* Accompanies unique handbag for arcs in smoked color.

Contraindications:

Morelli Ortodontia supplies the products only to qualified professionals. It is the responsibility of the orthodontist to identify conditions that may be contraindicated for treatment, such as:

- Patients with poor oral care;
- Patients incapable of cooperating with the treatment;
- Allergy to any of the orthodontic device materials;
- Diseases or other pre-existent conditions which may impair orthodontic treatment;
- Existing bone resorption;
- Existing Decalcification in dental enamel.
- Patients with divergent skeletal growth (long face).

Side effects:

It is the responsibility of the qualified professional to identify any possibility of risk of harm and / or contraindication that may arise during treatment, communicate to the patient the possibility of any unwanted side effect.

During treatment, unwanted side effects may include: tooth discoloration, decalcification, root resorption, periodontal complications, allergic reactions, difficulties in maintaining oral hygiene, discomfort and pain.

Composition/ Information of components:

Stainless Steel, Nylon Thermoplastic Polymer reinforced with Fiberglass.

Expiring date:

10 years

Warnings:

The product is indicated to the patient by a qualified professional, who must advise on the correct use of the product providing for the installation and removal of the Arch regularly as at intervals of each meal or oral hygiene.

This product hasn't been evaluated for compatibility and safety in Magnetic Resonance environment, the patient should be advised of this condition.

This product contains Nickel. A small percentage of the population is allergic to these metal. In case of allergic reactions, advise the patient to seek medical attention.



Non reusable product, as its reuse may cause cross infection and loss of mechanical properties due to natural wear.

The product is supplied in unsterile condition, however has proven biocompatibility, not being necessary cleaning, disinfection or sterilization measures, since the package has not been violated. If the product comes into contact with surfaces or substances other than its intended purpose prior to use, it is recommended to discard the product. The product should not be reused or reprocessed.

Product for exclusive application by a qualified professional, the use by person without the necessary technical knowledge may cause unwanted tooth movement, bone loss, loss of the dental element or even irreversible damages

It is up to the qualified professional to guide the patient about correct oral hygiene, to avoid the appearance of plaque or diseases such as gingivitis, periodontitis or even endocarditis.

Considering that the product is used in contact with mucous membranes and body fluids, it is recommended to the professional to apply the sanitary norms applicable for the disposal of medical products according to current sanitary regulations.

ATTENTION:

Morelli Ortodontia is not responsible for the results obtained by applying the product without due precautions or non-observance of the warnings.

Arcos extraorales



Los Arcos Extraorales son componentes del aparato ortodóncico, destinados a transmitir fuerzas clínicas generadas fuera de la cavidad bucal en las regiones cervical, occipital y parietal, las cuales son aplicadas en el movimiento y estabilización de elementos dentales o en el crecimiento óseo maxilofacial.

Indicación de uso:

Utilizado en conjunto con Traccionadores de Seguridad, los cuales determinan la fuerza aplicada en el Arco, son unidos por el arco externo a los diversos tipos de apoyo extraoral, ya el arco interno es conectado en tubos ortodóncicos ancorados en los dientes que sufrieron el movimiento o estabilización. Las situaciones clínicas son:

- Control de ancoraje;
- Distalización de molares;
- Intrusión de molares;
- Inclinación de corona de molares para distal;
- Contracción o expansión de la arcada dental superior;
- Control del crecimiento maxilar.

Instalación:

El encaje intrabucal de esos productos son hechos a través de un sistema que implica el diente, la banda, el tubo y la extremidad del arco interno que se introduce en el tubo molar.

El ancoraje extrabucal se hace utilizando en conjunto con Traccionadores de Seguridad, los cuales determinan la fuerza aplicada en el Arco, son unidos por el arco externo a los diversos tipos de apoyo extraoral como Talas Cervicales o Casquetes de Tracción Regulable (Interlandi).

Instrucciones para el ortodoncista:

- Conformar el Arco Extraoral para adaptarlo a cada caso clínico, utilice alicates adecuados y evite doblas en canto vivo pues pueden inducir el arco a fracturas, así como rebarbas las cuales pueden herir al paciente.
- No deben ser utilizados elásticos para ancoraje del Arco Extraoral, el uso de Traccionadores es imprescindible para la seguridad del paciente.
- El modo correcto de instalación del Arco Extraoral debe ser claramente demostrado al paciente y/o responsables.
- Fracturas del arco, solturas involuntarias y encajes incorrectos pueden ocasionar lesiones;
- El Arco Extraoral debe ser verificado a cada consulta y problemas relatados durante el uso deben ser analizados por el ortodoncista.
- Debe ser informado al paciente que el no cumplimiento de las Recomendaciones de Seguridad puede resultar en lesión.
- Arredonde las extremidades de encaje del arco interno para facilitar su acoplamiento en los tubos.
- Caso sea necesario promover la expansión de la arcada, prefiera introducir la dobla de expansión después del paciente estar familiarizado con la instalación del Arco Extraoral.
- El Arco Extraoral solamente está indicado para la finalidad propuesta, declarada ("Indicación de uso") pela Morelli.
- Entregue al paciente las Recomendaciones de Seguridad que acompañan el Arco Extraoral dentro de la bolsa plástica*.

Recomendaciones de Seguridad para el Paciente:

- Atención en el momento de la colocación o remoción del Arco Extraoral, el manoseo el encaje inadecuado puede causar lesiones en la mucosa, mejilla, rostro y ojos.
- Utilice un espejo para auxiliar la colocación del arco.
- Encaje el arco en los tubos antes de acoplar los traccionadores.
- Desencaje los traccionadores antes de remover el arco de los tubos.
- No aplique fuerza excesiva para encajar el arco en el tubo, si el encaje no ocurre con facilidad, busque su ortodoncista.
- No utilice el Arco Extraoral durante la práctica de deportes o actividades que puedan crear contacto físico indebido.
- El arco interno del arco extraoral puede causar irritación ocasionando pequeñas lesiones temporales en la boca, esas situaciones son comunes y ocurren solamente en la fase de adaptación inicial.

- Caso sea frecuente el desencaje del arco durante el período de sueño, informe el ortodoncista para que otra alternativa clínica sea considerada.
- Lave el Arco Extraoral frecuentemente a fin de prevenir el acúmulo de residuos del mismo.
- Caso se observen trincas o puntos de corrosión en el Arco Extraoral, comunique al ortodoncista para que el mismo evalúe la necesidad de sustitución del producto.

Se diferencian en sus dimensiones de modelos, siendo que la elección del tipo de Arco se realiza por el profesional, de acuerdo con la necesidad del tratamiento y la morfología de la arcada dental del paciente.

Almacenamiento:

Cuando el arco no esté en utilización deberá ser almacenado de forma adecuada, en la bolsa proyectada específicamente para esta aplicación.



*Todos los arcos vienen acompañados de una bolsa para arcos en el color gris.

Contraindicaciones:

- La Morelli Ortodontia ofrece los productos sólo a personal cualificado. Es responsabilidad del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicados para el tratamiento tales como:
- Los pacientes con mala higiene bucal;
- Los pacientes incapaces de cooperar con el tratamiento;
- La alergia a cualquiera uno de los materiales del aparato;

- Las enfermedades u otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia;
- Reabsorción ósea existente;
- Descalcificación existente en el esmalte dental.
- Pacientes con crecimiento esquelético divergente (rostro largo).

Efectos colaterales:

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y / o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados.

Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir: decoloración de los dientes, descalcificación, reabsorción de la raíz, complicaciones periodontales, reacciones alérgicas, dificultad en el mantenimiento de la higiene oral, incomodidad y dolor.

Composición/Información sobre los componentes:

Acero Inoxidable, Polímero termoplástico de Nylon reforzado con Fibra de Vidrio.

Validez:

10 años

Advertencias:

El producto está indicado al paciente por profesional cualificado, lo cual debe orientar sobre el uso correcto del producto previendo instalación y remoción del Arco regularmente como en intervalos de cada comida o higienización bucal.

Este producto no tuvo su biocompatibilidad y seguridad evaluada en el ambiente de resonancia magnética, el paciente debe ser orientado sobre esa condición.

Este producto contiene Níquel. Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a esto metal. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, oriente al paciente a buscar un médico.



Producto no reutilizable. La esterilidad, la limpieza requerida y la resistencia mecánica del dispositivo no está garantizada en caso de reutilización.

El producto se suministra en condición no estéril, pero ha demostrado biocompatibilidad, no son necesarios pasos de limpieza, desinfección o esterilización, ya que el paquete no ha sido violado. Si el producto, antes del uso, entre en contacto con superficies u otras sustancias distintas

de finalidade de uso, se recomenda desechar la misma. El producto no debe ser reutilizado o reprocesado.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida de masa ósea, pérdida de dientes o daños irreversibles.

Corresponde al profesional cualificado instruir al paciente sobre la higiene oral adecuada, para evitar la aparición de placa o enfermedades como la gingivitis, la periodontitis o la endocarditis.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

ATENCIÓN:

La Morelli Ortodontia no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Códigos / Reference/ Códigos:

PT Arcos extraorais

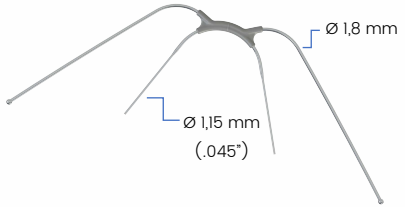
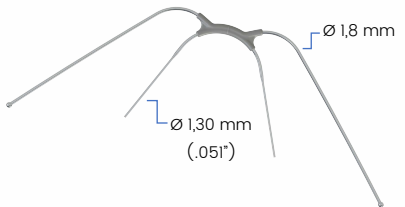
Os Arcos extraorais são comercializados nas seguintes medidas:

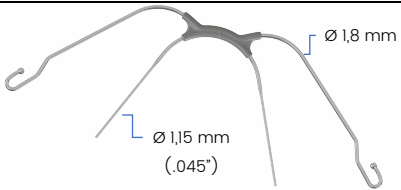
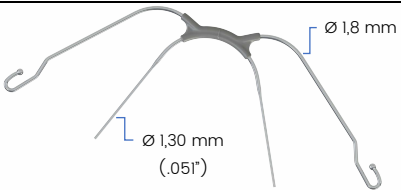
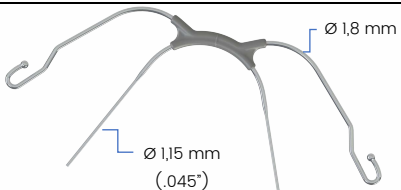
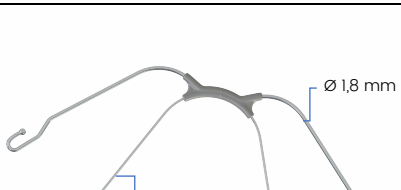
EN Facebows

The Facebows are marketed under the following measures:

ES Arcos extraorales

Los Arcos extraorales se comercializan en las siguientes medidas:

Medida / Measure / Medida	Quant. / Qty. / Cant.	Cód. / Cod. / Cód.
 <p>Ø 1,15 mm (.045")</p> <p>Ø 1,8 mm</p>	01	50.10.001
 <p>Ø 1,30 mm (.051")</p> <p>Ø 1,8 mm</p>		50.11.001

	01	50.10.002
	01	50.11.002
	01	50.10.003
	01	50.10.005

Controle de Revisões / Revision Control / Control de revisión		
Revisão nº	Data / Date / Fecha	Alterações / Alterations / Actualizaciones
Revisión nº		
00	08/2017	Elaboração e disponibilização no portal Morelli. / Elaboration and availability on the Morelli website. / Elaboración y disponibilidad en la página web Morelli.