


TUBO cruzado

COM RECUO CERVICAL

Para o desenvolvimento deste produto contamos com avaliação clínica e participação especial do **Dr. Hideo Suzuki**, que sugeriu adaptações no Tubo Cruzado Convencional.

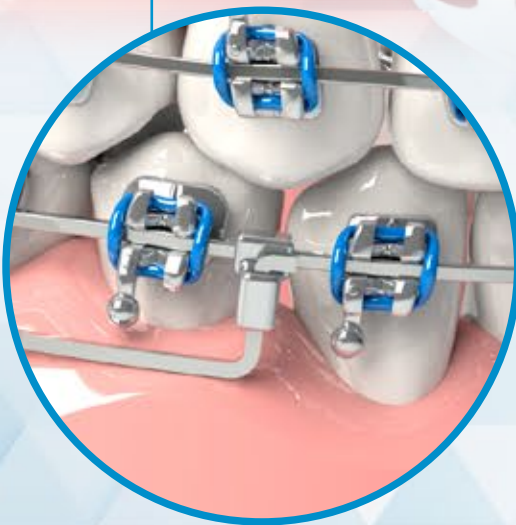

O novo
Tubo Cruzado
possui um recesso
vertical que previne
que a dobra do fio
toque nos dentes
antagonistas.

Os Tubos Cruzados são compostos por dois tubos retangulares sobrepostos e perpendiculares que podem alojar fios de até .021" x .025", sendo ancorados nos arcos por meio de compressão. Este acessório permite alojar arcos segmentados, cantilever, e outros, auxiliando nas mecânicas de verticalização, fechamento de espaço e ancoragem.

ESPECIFICAÇÕES

Embalagem: 10 unidades

Código: 30.40.016