


• LANÇAMENTO

Pearl Blue

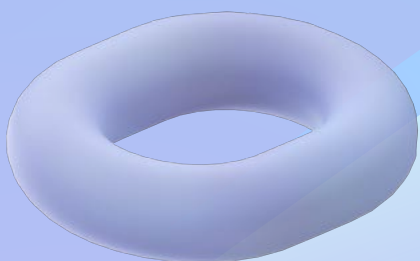

A Verdadeira **Ligadura Estética**

Os elásticos **Pearl Blue Morelli** são ideais para todos os tratamentos ortodônticos, e especialmente indicado ao tratamento com bráquetes estéticos. Devido sua alta resistência a manchas e cor azulada, apresenta um excelente resultado estético!

Pearl Blue

Pigmento Furta-Cor

O Detalhe que Faz a Diferença!



Efeito holográfico, iridescente, furta-cor é um fenômeno óptico que faz certos tipos de superfícies refletirem variadas cores, tal como um arco-íris, conforme a incidência de luz. Aplicado às ligaduras elásticas, esse efeito ajuda a disfarçar a alteração de cor que é inerente à matéria prima dos elásticos. Como todo polímero, infelizmente as ligaduras são suscetíveis a certo grau de pigmentação ao serem expostas a pigmentos muito fortes, tal como vinho, café, mostarda entre outros alimentos altamente pigmentados.



Aditivo Antimicrobiano

Os elásticos **Pearl Blue Morelli** recebem um **aditivo antimicrobiano especial** amplamente utilizado na área da saúde, para **prevenir o manchamento e manter as propriedades mecânicas** das ligaduras.

As bactérias se multiplicam com alta velocidade no ambiente bucal. Nos materiais plásticos o primeiro ponto afetado é a higiene do produto. Propriedades do polímero também podem ser afetadas, diminuindo a vida útil da peça.

A incorporação de aditivos antimicrobianos na matriz do polímero tem a **função de impedir o desenvolvimento e a fixação de bactérias**, o que evita o aparecimento de manchas, odores e até a perda de propriedades mecânicas, ocasionados por fungos e bactérias.



Qualidade Superior

Diferente de muitos elásticos perolados do mercado, que possuem apenas uma diferença visual, o elástico **Pearl Blue Morelli**, além de contar com o aditivo antimicrobiano, utiliza um **pigmento de qualidade superior**, garantindo o **melhor resultado de resistência e estética** ao tratamento ortodôntico.



Memória de Forma e Propriedades Mecânicas

Ao combater fungos e bactérias, é possível preservar as propriedades mecânicas dos elásticos **Pearl Blue Morelli**. Contudo, também realizamos o **tratamento térmico** do material, garantindo **maior memória de forma** dos elásticos.

O alto grau de resistência às deformações permanentes contribui muito para o tratamento ortodôntico, especialmente durante a aplicação dos elásticos em corrente, que são submetidos a grandes alongamentos.

Tipo	Identificação	Quantidade	Código
Modular	Elástico Ligadura Modular Pearl Blue	Pacote com 500 unid.	60.06.010
Corrente	Elástico Corrente Curto Pearl Blue	Carretel com 1,5m	60.05.101
	Elástico Corrente Médio Pearl Blue	Carretel com 1,5m	60.05.201
	Elástico Corrente Longo Pearl Blue	Carretel com 1,5m	60.05.301

MORELLI

www.morelli.com.br

0800 0121455 / 0800 7031455