


CONTENÇÃO TWISTFORM

O TwistForm é a solução mais prática para as contenções fixas, no momento da finalização dos casos ortodônticos. Um fio com maleabilidade ideal, que se adapta instantaneamente, sem precisar de moldagens ou escaneamentos.

Além da contenção com espessura total de .020" (Ø 0,50 mm), agora temos uma nova opção para casos que exigem maior resistência à recidiva, com medida de .026" (Ø 0,65 mm). Ambas garantem perfil baixo para maior conforto ao paciente e menor risco de soltura.


As Contenções TwistForm têm uma combinação de 3 fios de aço inox (CrNi) perfeitamente trançados, que passam por um tratamento térmico especial, para terem a maleabilidade ideal e perfeita acomodação.

Cada contenção possui aproximadamente 4 cm de comprimento, uma extensão que permite ajuste de tamanho para a contenção 3x3 em qualquer paciente.

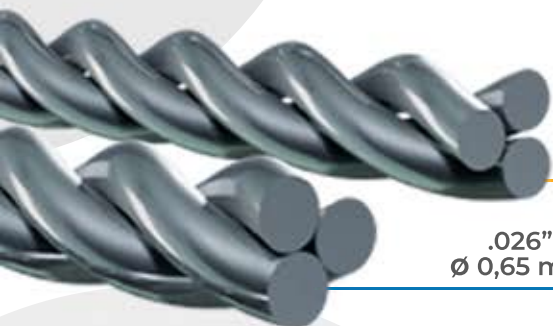

.020"
Ø 0,50 mm

.026"
Ø 0,65 mm

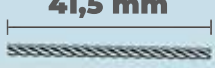MEDIDA	COMPRIMENTO	QTD.	CÓDIGO
 .020" Ø 0,50 mm	 41,5 mm	10	30.06.303
 .026" Ø 0,65 mm	 41,5 mm	10	30.06.304



Assista ao vídeo com a explicação completa sobre o uso do Twist Form.

Aponte a câmera do seu celular para realizar a leitura do QR code ao lado.

POR QUE UTILIZAR O TWISTFORM?

- Menos tempo de cadeira;
- Mais economia para confecção de contenções;
- Fácil de aplicar, pois adapta-se naturalmente à curvatura do arco lingual;
- Perfil baixo para conforto do paciente;
- Permite micro movimentações dento-alveolares, com menor índice de soltura e retrabalho;
- Cola em qualquer orientação, melhor que as fitas de contenção que colam de um só lado;
- Não corta o fio dental na higienização, pois não tem arestas como as fitas de contenção.