



Os Bráquetes da Linha Max são construídos em corpo único pelo sistema MIM (Metal Injection Molding), sem soldas, possuem baixa quantidade de níquel e comprovada resistência do aço inoxidável.

O esmerado polimento resulta em excelente brilho além de cantos totalmente arredondados e acentuado deslize no slot, oferecendo conforto, estética e eficiência ao tratamento.

A precisão dimensional é garantida pela moldagem do aço inoxidável. Esta tecnologia reproduz com perfeição os ângulos, torques e medidas de slot preconizados pelas prescrições para oferecer a melhor segurança do controle e finalizações dentárias.




Mésio-distal

Cérvico-oclusal

Os bráquetes da Linha Max acompanham a anatomia méso-distal e cérvico-oclusal dos dentes, cuja adaptabilidade da base aliada ao tratamento por jato abrasivo, oferece máxima eficácia de colagem.

O posicionamento das bases e a altura reduzida dos bráquetes inferiores revelam a preocupação para evitar o impacto causado pela oclusão dos dentes antagônicos, principal causador de quedas e retornos improdutivos ao consultório.

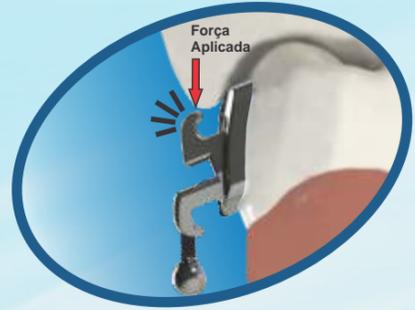

As principais técnicas de Bráquetes disponíveis na Linha Max



Roth

	1 Kit 20 peças	5 Kits 100 peças	100 Kits 2000 peças	
slot .022"	10.15.905	10.15.915	10.15.925	Ganchos nos caninos (13°) e pré-molares
slot .018"	10.15.904	10.15.914	10.15.924	
slot .022"	10.15.903	10.15.913	10.15.923	Ganchos nos caninos (9°) e pré-molares
slot .018"	10.15.902	10.15.912	10.15.922	



M.B.T.

	1 Kit 20 peças	5 Kits 100 peças	
slot .022"	10.35.906	10.35.916	Ganchos nos pré-molares
slot .022"	10.35.905	10.35.915	Ganchos nos caninos e pré-molares



Edgewise Slim

	1 Kit 20 peças	5 Kits 100 peças	
slot .022"	10.65.905	10.65.915	sem Gancho
slot .018"	10.65.904	10.65.914	
slot .022"	10.65.907	10.65.917	Ganchos nos caninos
slot .018"	10.65.906	10.65.916	



Capelozza

	1 Kit 20 peças	5 Kits 100 peças	
slot .022"	10.19.904	10.19.914	Padrão I - Ganchos nos caninos e pré-molares
slot .022"	10.19.905	10.19.915	Padrão II - Ganchos nos caninos e pré-molares
slot .022"	10.19.906	10.19.916	Padrão III - Ganchos nos caninos e pré-molares